

PRIROČNIK ZA UPORABO – SLO
IN 23304 Električni grelni pas inSPORTline Avochi


VARNOSTNI UKREPI

- Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Upoštevajte vsa opozorila in previdnostne ukrepe, da preprečite škodo ali poškodbe.
- Uporabljajte ga samo v skladu s tem priročnikom. Nepravilna uporaba lahko povzroči resne poškodbe ali zlom izdelka. Ne delajte nepravilnih sprememb tega pasu.
- Uporabljajte samo originalni (dobavljeni) pribor in originalne nadomestne dele.
- Nikoli ga ne uporabljajte med spanjem ali z zmanjšano občutljivostjo.
- Ne uporabljajte ga več kot 2 uri neprekinjeno.
- Hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev. To ni igrača. Ta izdelek je namenjen samo odraslim uporabnikom.
- Osebam z zdravstvenimi zapleti (ohromelost, toplotna neobčutljivost ipd.) uporaba ni dovoljena.
- Ta izdelek ni primeren za nosečnice in diabetike.
- Ni primeren za težko zaspane ali raztresene ljudi.
- Nikoli ga ne uporabljajte na mestih z vnetljivimi snovmi in plini ali v skladiščih kisika.
- Ne pritiskajte ali potiskajte ali močno sedite na ta izdelek.
- Med uporabo ali pakiranjem ga ne zlagajte ali zvijajte.
- Nikoli ne uporabljajte zatičev ali drugih kovinskih komponent, da preprečite električni udar.
- Kabla nikoli ne izvlecite nenadoma iz vtičnice. Redno ga preverjajte glede poškodb ali obrabljenosti.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega ali obrabljenega izdelka.
- Preden začnete uporabljati ta izdelek, se posvetujte z zdravnikom. Če med uporabo opazite kakšne zdravstvene zaplete ali vrtoglavico, takoj prenehajte.
- Ta izdelek ni primeren za ljudi z akutno poškodbo, krvavitvijo ali edemom.
- Nikoli ne sedite, ne ležite ali močno pritiskajte na ta izdelek.
- Nikoli ne uporabljajte nobenega izolacijskega materiala za pokrivanje tega grelnega pasu, ko je električen.
- Redno pregledujte kožo, da preprečite opekline.
- Uporabljajte le ustrezen vir napajanja. Drug vir napajanja morda ne zadostuje zaradi razlike v napajanju.
- Ta izdelek nima nobenega terapevtskega certifikata in njegova uporaba ne nadomešča profesionalne zdravstvene oskrbe.

VZDRŽEVANJE



Ročno pranje

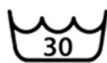

Pranje pri ali pod 30°C



Ne likajte



Ne belite



Ne umivajte



Ne čistite kemično



Obesite na suho.



Ne ožemajte

UPORABA

- Namestite pas udobno okoli vašega pasu.
- Samo-grelni magneti: Med zimo obrišite grelne dele pasu z vodo.
- Če začutite pekoče občutke, takoj prenehajte z uporabo.