

PRIROČNIK ZA UPORABO – SLO
Infrardeči LED panel inSPORTline Katuni IN25851



VARNOSTNA NAVODILA


- Pred prvo uporabo in sestavljanjem natančno preberite priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
- Naprava ni igrača, otrok in hišnih ljubljencev ne puščajte v bližini naprave brez nadzora.
- Ne glejte neposredno v luči.
- Naprava mora biti pravilno nameščena, če niste prepričani o montaži, se obrnite na strokovnjaka.
- Izdelek ni primeren za: nosečnice, osebe z epilepsijo, alergije na svetlobo in toploto, osebe z občutljivo kožo, dermatološke bolezni, osebe s poškodbami ali brazgotinami ipd.
- Ne potaplajte v vodo.
- Ne uporabljajte dlje časa.
- Naprave ne spreminjajte ali popravljajte.
- Pogostost uporabe: na začetku 1-2 min na predel, čez 2-3 tedne do 10 min na predel.
- Standardna uporaba je lahko 10 minut na sejo na razdalji 15 do 40 cm od naprave. Najdaljši čas uporabe je lahko 15-20 minut za problematična področja. Priporočamo 6-urne presledke med sejami in uporabo naprave 2-3 krat na dan.

OPOZORILO: Naprava ni nadomestilo za medicinsko ali terapevtsko oskrbo.

OPOZORILO: Nosite zaščito za oči. Nikoli ne glejte neposredno v LED. NIR (bližnja infrardeča svetloba) ni vidna

s prostim očesom.

OPIS IZDELKA

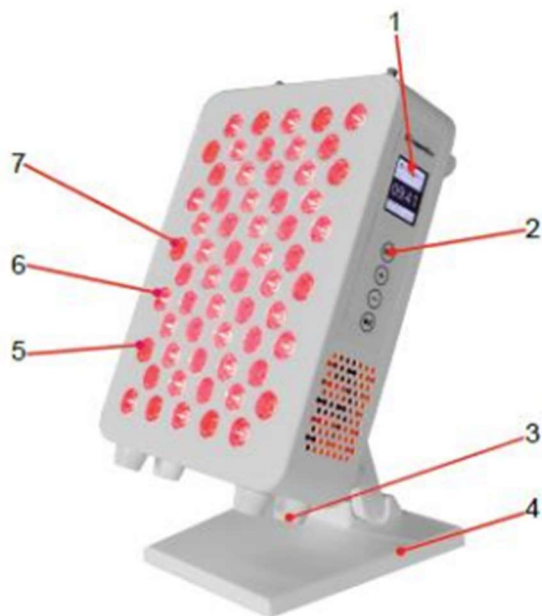

1. LED zaslon
2. Uporabite gumbe
3. Protizdrsne noge
4. Standard
5. 60 LED lučk
6. Rdeče luči
7. Bližnja infrardeča svetloba

VSEBINA PAKETA



SPECIFIKACIJE

Dimenzije	28,4 x 20,8 x 13 cm
Teža	3,25 kg
Valovna dolžina	650 nm, 850 nm
Število LED lučk	60 kosov, 5 W
Nastavitev časa	Privzeto: 10 min, največ: 20 min
Obsevanje	180 mw/cm ² na 15 cm
Material	Kovinsko ohišje
Seznam delov	1x LED plošča, 1x očala, 1x priročnik, 1x napajalni kabel, 1x krmilnik

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem se prepričajte, da je naprava izključena iz električnega toka. Kovinske dele (razen LED luči) očistite z vlažno mikrotanko krpo. Nikoli ne nanašajte vode neposredno na napravo. Ne dovolite, da bi voda ali vlaga prišla v zračnike.

Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

Hraniti v senčnem, suhem in čistem prostoru pri temperaturi od 0 - 40°C

UPORABA



1. Zaslón: prikaz vmesnika (čas, način, svetlost, utrip)
2. Nastavite: čas nastavitve, valovno dolžino, svetlost in utripanje
- 3, 4. Gumba + in -:
nastavitev časa od 1 do 30 min, sprememba po 1 min, prvotna časovna vrednost: 10 min
nastavitev svetlosti: 1% do 100%
nastavitev načina: samo rdeča, samo NIR, mešano
nastavitve pulziranja: od 1 do 9999 Hz, brez
5. Začetek: po nastavitvi načina pritisnite gumb za zagon programa

Rdeča svetloba z valovno dolžino 650nm, 850nm izboljša kožo, prekrvavitev in izboljša proizvodnjo kolagena in elastina.

NIR (bližnja infrardeča spektroskopija) zmanjšuje vnetje, lajša bolečine v mišicah in sklepih, popravlja notranja tkiva, kot so mišice, sklepi in organi.

Kombinacija rdeče svetlobe in NIR združuje prednosti obeh sevanj.

Opomba: bližnja infrardeča svetloba ni vidna s prostim očesom.

Opomba: Domet krmilnika je 15 metrov v idealnih pogojih. Krmilnik mora biti med uporabo dovolj oddaljen.

VARSTVO OKOLJA

Po izteku življenjske dobe izdelka ali če je morebitno popravilo neekonomično, ga zavržite v skladu z lokalno zakonodajo in okolju prijazno na najbližjem odpadku. S pravilnim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagate zaščititi zdravje ljudi. Če niste prepričani v pravilno odlaganje, prosite lokalne oblasti, da se izognejo kršitvi zakona ali sankcijam. Baterij ne odlagajte med hišne odpadke, temveč jih oddajte na reciklažo.