


PRIROČNIK ZA UPORABO – EN

IN 24990 Negovalna LED maska za obraz inSPORTline Esgrima

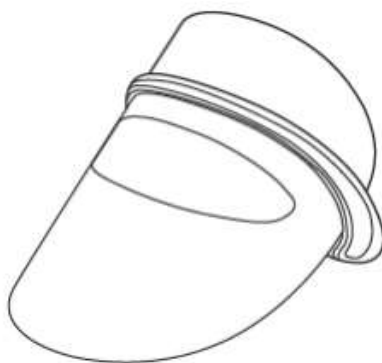

VARNOSTNA NAVODILA

- Pred uporabo preberite priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
- Ni primerno za nosečnice.
- Ni primerno za ljudi z epilepsijo.
- Ni primerno za ljudi, ki jemljejo zdravila za ščitnico.
- Po uporabi napravo očistite z bombažno krpo. Napravo nežno očistite, da se izognete deformacijam in poškodbam.
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.
- Napravo shranjujte v senčnem in suhem prostoru. Hraniti izven dosega sonca.
- Naprave ne popravljajte, spreminjajte ali uporabljajte samo za namene, opisane v priročniku. Ne shranjujte v ekstremnih pogojih ali na neposredni sončni svetlobi.


SPECIFIKACIJE

Model: IF-0802


Čas delovanja: 10-30 min

Napetost: 9 W

Vhodna napetost: 5 V - 2 A

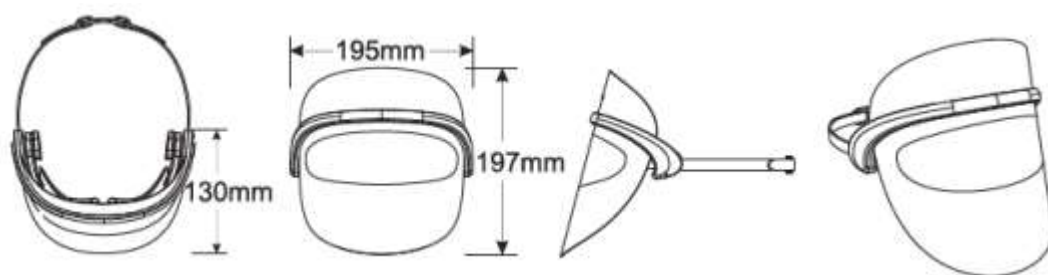

OPIS IZDELKA

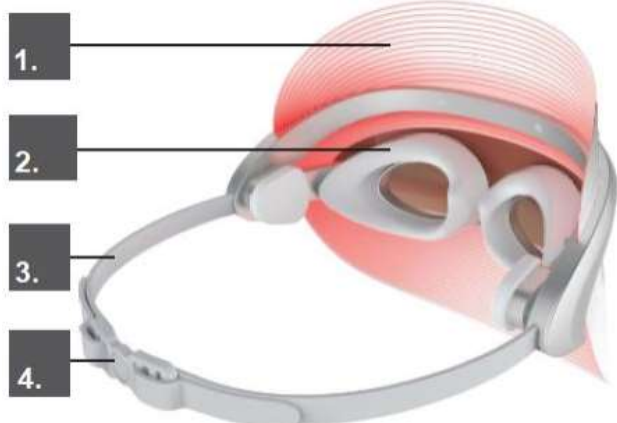

1. LED lučka
2. Antibakterijski silikonski okvirji
3. Silikonski trak
4. Nastavljiva zaponka

UPORABA

- Očistite in posušite obraz. Nastavite trak na pravilno dolžino.
- Prepričajte se, da je baterija napolnjena, ali pa baterijo napolnite prek vrat USB (5V 1A)
- Za boljši učinek lahko uporabite masko za obraz ali druge kozmetične izdelke, namenjene koži (losjon, olja).
- Masko za obraz nosite 10 - 20 minut. Uporabnik lahko uporablja masko do 30 minut po ca. mesecih redne uporabe.

1. Pritisnite gumb za vklop (2.) za 1 sekundo. Nastavite lahko temperaturo, frekvenco vibriranja, LED svetlobno terapijo.


2. Za izklop držite gumb za vklop (2.) 1 sekundo.

3. Na kratko pritisnite gumb za vklop (2.), da nastavite vibriranje.

4. Pritisnite gumb časovnika (3.), da nastavite začetni čas na 10 min, 15 min, 20 min in 30 min.

5. Držite gumb časovnika (3.) 1 sekundo, da nastavite terapijo z LED svetlobo.

Na izbiro je 7 vrst terapevtskih barv.

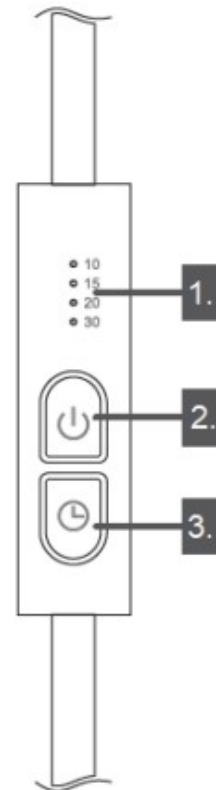

SVETLOBNA TERAPIJA

Rdeča

Povečan pretok krvi in proizvodnja kolagena. Pomaga pri obnovi tkiva (zamenjava starih kožnih celic z novimi) in zmanjšanju por.

Zelena

Pomaga uravnovesiti barvo pigmenta, pospešiti regeneracijo kože in zmanjšati mastenje

Modra

Pomirjujoče, protivnetno, uničuje kožne bakterije

Oranžna

Energizira kožo, pomaga zmanjšati gube, uravnovesiti barvo pigmenta in zgladiti kožo

Vijolična

Pomaga pri preprečevanju aken

Svetlo modra

Pomaga povečati celično energijo in izboljša metabolizem

Bela

Pomaga izboljšati napetost kože in presnovo tkiv

Nega oči

Temperatura 40 °C zmanjšuje suhost in utrujenost oči. Zmehča kolobarje in vrečke pod očmi.

VARSTVO OKOLJA

Po izteku življenjske dobe izdelka ali če je morebitno popravilo neekonomično, ga zavržite v skladu z lokalno zakonodajo in okolju prijazno na najbližjem odpadku.

S pravilnim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagате zaščititi zdravje ljudi.

Če niste prepričani v pravilno odlaganje, prosite lokalne oblasti, da se izognete kršitvam zakonodaje ali sankcijam.

Baterij ne odlagajte med hišne odpadke, temveč jih oddajte na reciklažo.