



PRIROČNIK ZA UPORABO - SLO

IN23199 Ultrazvočni masažni aparat inSPORTline Valeri

VARNOSTNA NAVODILA

- Pred uporabo preberite priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
- Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel vroč ali če je vtič poškodovan.
- Hraniti ločeno od vode in vlage.
- Naprava ni igrača, hranite izven dosega otrok in domačih živali.
- Med uporabo ne premikajte elektrod in ne dovolite, da bi se druga oseba dotikala naprave.
- Elektrod ne nameščajte na veke, čelo, prsi ali blizu srca.
- Ni primerno za: nosečnice, osebe z okužbami, dermatološkimi obolenji, osebe, ki uporabljajo srčne spodbujevalnike ali druge električne naprave itd.
- Pred zagonom ali izklopom napravo vedno nastavite na najnižjo jakost.
- **OPOZORILO:** Naprava ne služi kot nadomestilo za medicinsko ali terapevtsko oskrbo.


OPIS IZDELKA



1. Grelna glava
2. Ultrazvočna glava
3. Stikalo
4. Električna masaža
5. Ogrevanje
6. Ultrazvočna masaža
7. Elektrode
8. Par elektrod, ki imata enako polarnost
9. Par elektrod, ki imata enako polariteto
10. Nastavitev intenzivnosti
11. Izbira načina električne masaže EMS
- 12/13 Prikaz intenzivnosti ultrazvočne masaže
14. EMS povezava

UPORABA – ULTRAZVOČNA MASAŽA

1. Priključite napravo na električni tok.
2. Zaženite napravo, zasveti rdeči indikator.

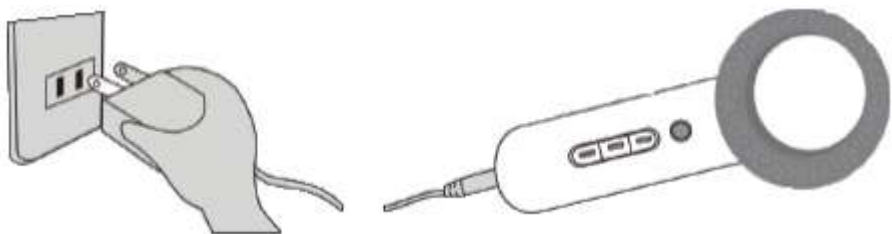

3. Pritisnite gumb SONIC. Naprava se zažene pri najnižji intenzivnosti. Če želite povečati intenzivnost, večkrat pritisnite gumb SONIC. Za bolj občutljive predele priporočamo nizko intenzivnost.

4. Na masirane predele nanesite kremo, da koža ni izsušena.



5. Nanesite kremo na glavo.

6. Napravo lahko uporabljate.

OPOZORILO: Naprave ne uporabljajte na grlu, vekah, očeh, sklepih ali kosteh.



UPORABA - EMS

1. Z vlažno brisačo očistite želeni del telesa od maščobe, kreme itd.
2. Povežite elektrode s kablji, nato položite pozitivne in negativne elektrode na različne dele telesa.




3. Nastavite intenzivnost na najnižjo vrednost.
4. Priključite kable na napravo.
5. Zaženite napravo (sveti rdeča dioda).
6. Izberite vrsto masaže (tapkanje, masaža, gnetenje, strganje, hujšanje).
7. Pritisnite gumb EMS.
8. Nastavite intenzivnost na eno od 5 vrednosti.
9. Naprava se samodejno izklopi po 10 minutah delovanja.
10. Priporočamo, da začnete z 10 minutami in po možnosti povečate na največ 30 minut.
11. Ko končate, izklopite izbrani način in nastavite intenzivnost na najnižjo vrednost.

NASVETI ZA NAMESTITEV ELEKTROD

OPOZORILO: Naslednji položaji elektrod so samo orientacijski in niso v zdravstvene ali medicinske namene. Spodaj so opisane akupunkturne točke in vrste masaž:

Tapkanje / Tapping

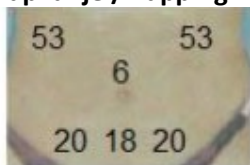

Tonizacija trebuha:


(20): Shuidao
(6): Shuifen
(18): Guanyuan
(53): Zhishi



Okrepitev bokov:

(54): Huanxiao
(62): Chengfu

Masaža / Massage

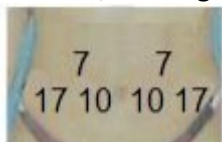


Krepitev pasu:

(10): Tianshu
(7): Taiyi



(17): Daimai
(47): Shenyu

Gnetenje / Kneading

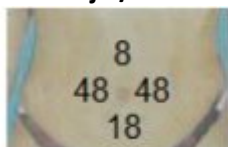

Oblikovanje trebuha:

(18): Guanyuan
(48): Dachangyu
(8): Zhongyuan

Strganje / Scrapping




Podpora koži:

(44): Feiyu

(45): Gangyu

(5): Roumen

Hujšanje / Slimming

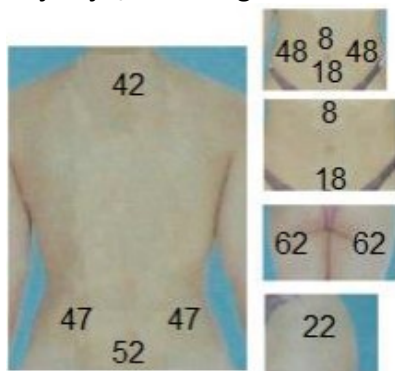

Zmanjšanje telesne teže:

(42): Dazhui

(52): Yangguan

(8): Zhongyuan

(18): Guanyuan

(22): Juliao

(47): Shenyu

(62): Chengfu

OGREVANJE

Za začetek ogrevanja vklopite napravo in pritisnite INFRARDEČO tipko. Po minuti se naprava segreje. Med ogrevanjem ne glejte v glavo.

PO UPORABI

1. Prepričajte se, da so vse funkcije izklopljene.
2. Izklopite napravo.
3. Odklopite elektrode in jih shranite na varno.
4. Masažno glavo in elektrode obrišite z vlažno krpo.
5. Za čiščenje ne uporabljajte topil ali agresivnih čistil.
6. Napravo shranite v škatlo.

VARSTVO OKOLJA

Po koncu življenjske dobe izdelka ali v primeru, da nadaljnje popravilo ne bi bilo več ekonomsko ugodno, izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in na okolju prijazen način. Izdelek odnesite na najbližje označeno zbirno mesto. Z odlaganjem po predpisih boste pripomogli k ohranjanju dragocenih naravnih virov in preprečili negativne vplive na okolje ali zdravje ljudi. Če niste prepričani, se posvetujte z lokalnimi pristojnimi organi, da preprečite kršitev predpisov in kasnejšo kazni.

Baterij ne odvrzite med običajne odpadke, temveč jih oddajte na mesta, ki so določena za recikliranje.

GARANCIJSKI POGOJI, REKLAMACIJE

- Garancija je 12 mesecev.

Garancijski pogoji ne veljajo za napake:

- krivda uporabnika, tj. poškodba izdelka zaradi nestrokovnega popravila, nepravilne montaže
- nepravilno vzdrževanje
- mehanske poškodbe
- obraba delov med običajno uporabo (npr. gumijasti in plastični deli, gibljivi mehanizmi, spoji itd.)
- neizogiben dogodek, naravna nesreča
- nestrokovni posegi
- nepravilno ravnanje ali nepravilna namestitvev, nizka ali visoka temperatura, izpostavljenost vodi, nesorazmerni tlak in udarci, namerno spremenjena oblika, oblika ali mere.