



NAVODILA ZA UPORABO – SLO

IN18010 Masažni aparat za noge inSPORTline Otterchill



VARNOSTNA NAVODILA

- Natančno preberite priročnik.
- Izdelek po uporabi vedno izključite iz vtičnice.
- Če naprava pride v stik z vodo, se je ne dotikajte in jo takoj odklopite.
- Ne uporabljajte med tuširanjem.
- Ne shranjujte v vlažnih prostorih, v vodi ali blizu nje.
- Ne spuščajte tekočine.
- Ne puščajte brez nadzora, ko je priključen. Izdelek po uporabi vedno odklopite.
- Ne uporabljajte pod odejo ali blazino. Prekomerno segrevanje lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
- Pri uporabi izdelka v bližini otrok ali oseb z zmanjšanimi duševnimi ali telesnimi sposobnostmi je potreben nadzor.
- Uporabljajte samo za predvidene namene. Ne spreminjajte izdelka.
- Nikoli ne poskušajte uporabljati izdelka, če je napajalni kabel poškodovan ali moker. Če je izdelek poškodovan, se za popravilo obrnite na svojega dobavitelja ali strokovnjaka.
- Ne vlecite za napajalni kabel.
- Napajalni kabel držite stran od virov toplote.
- Prezračevanje naj bo vedno prosto.
- Nikoli ne spuščajte nobenih predmetov v prezračevanje.
- Ne uporabljajte zunaj.
- Izklopite vse funkcije in nato izvlecite vtič iz vtičnice.
- Ne uporabljajte funkcije ogrevanja, če ste občutljivi na toploto. Hranite ločeno od otrok in oseb z omejenimi duševnimi ali telesnimi sposobnostmi.
- Maser uporabljajte le, če sedite.
- Maserja ne uporabljajte dlje kot 1 uro. Maser je priporočljivo uporabljati v intervalih po 20 minut.


- Ljudje, ki trpijo za: kronično ali hudo kožno boleznijo, težavami s srcem, telesnimi poškodbami, zvišano telesno temperaturo, možgansko kapjo ali nosečnice in duševno bolne osebe ne smejo uporabljati izdelka.
- Ne uporabljajte pod vplivom drog in alkohola.
- Ne uporabljajte ga eno uro pred obrokom in po njem.
- Za čiščenje izdelka uporabite vlažno krpo. Za čiščenje izdelka ne uporabljajte alkohola ali vode.
- Izdelka ne popravljajte ali spreminjajte sami.
- Ne stojte in ne sedite na maserju.
- Za odpravo draženja kože med masažo nosite nogavice.
- Maserja ne spuščajte z višine.
- Ne vstavljajte tujih predmetov v odprtino za zrak.

UPORABA

- Priključite v vtičnico.
 - Na zaslonu se prikaže OF, kar pomeni, da je maser pripravljen in v stanju pripravljenosti. Masažo začnite s pritiskom na gumb ON/OFF. Na zaslonu se prikaže OO. Maser se samodejno vključi pri 1 nivoju vibracij.
 - Hitrost prilagodite s pritiskom na tipki + in -. Obstaja 15 stopenj vibracij. Zaslon se bo po izbiri hitrosti preklupil na kalorije.
 - Za vklop funkcije ogrevanja - pritisnite gumb FIR na napravi in Infrared na daljinskem upravljalniku. Funkcijo ogrevanja lahko vklopite neodvisno.
 - Časovnik lahko nastavite na 10, 20, 30 minut. Masaža se bo po izbranem času samodejno ustavila.
 - Za samodejno prednastavljeno masažo pritisnite gumb SELECT. Pritisnite + in - za vrnitev v ročni način.
 - 4 prednastavljeni načini:
 - Način vitalnosti
 - Način sprostitve
 - Način refleksoterapije
 - Način hujšanja
 - Pri uporabi vnaprej nastavljene masaže lahko izberete čas.
 - Število kalorij se prikaže po nekaj sekundah.
 - Masaža se bo začela pri nizki stopnji, nato pa lahko stopnjo prilagodite svojim zahtevam.
- Ne uporabljajte več kot 30 minut.
- Po uporabi odstranite vtičnico.

MENJAVA BATERIJE

- Baterija se nahaja na zadnji strani brezžičnega krmilnika.
- Pritisnite majhno sponko in izvlecite predal za baterije predala.
- Uporabite "LITHIUM" baterijo CR2025.

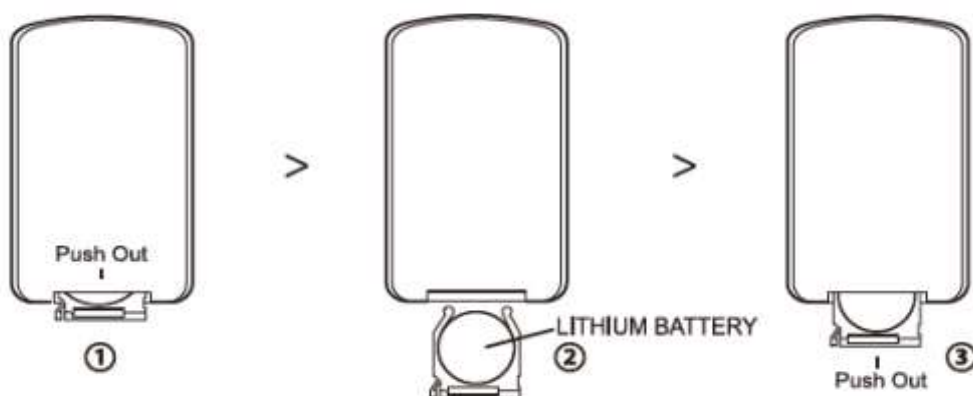

ALTERNATIVNA UPORABA

Maser lahko uporabljate tudi na drugih delih telesa. Vibracije pomagajo sprostiti mišice in zmanjšati otrplost pri uporabi na mečih, stegnih, hrbtu ali pasu. Redno ga lahko uporabljamo na predelih trebuha in stegen.



Noge postavite na sredino tlačne blazinice.



Naslonite zgornji del hrbta in ramen na tlačno blazinico, da zmanjšate bolečine v vratu, rokah ali ramenih.



Udobno se namestite in sredino tlačne blazinice maserja položite pod stegna. (Nosite dolge hlače)

GARANCIJSKI POGOJI, REKLAMACIJE

- Garancija je 12 mesecev.

Garancijski pogoji ne veljajo za napake:

- krivda uporabnika, tj. poškodba izdelka zaradi nestrokovnega popravila, nepravilne montaže
- nepravilno vzdrževanje
- mehanske poškodbe
- obraba delov med običajno uporabo (npr. gumijasti in plastični deli, gibljivi mehanizmi, spoji itd.)
- neizogiben dogodek, naravna nesreča
- nestrokovni posegi
- nepravilno ravnanje ali nepravilna namestitvev, nizka ali visoka temperatura, izpostavljenost vodi, nesorazmerni tlak in udarci, namerno spremenjena oblika, oblika ali mere.

ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

FS SPORT d.o.o.

Hosta 13, 4220 Škofja Loka, Slovenija

T: +386 (0)4 51 51 880

E: info@insportline.si

W: www.insportline.si