

PRIROČNIK ZA UPORABO – SLO


Radiofrekvenčni masažni aparat za okoli oči inSPORTline Eyewish IN23084



VARNOSTNA NAVODILA

- Pred uporabo preberite priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.
- Pred uporabo s telesa odstranite vse kovinske predmete in nakit.
- Ne uporabljajte med polnjenjem.
- Ne popravljajte ali spreminjajte izdelka, če naprava ne deluje pravilno, obrnite se na servisno službo.
- Ni primerno za osebe, občutljive na toploto, alergije na kovine ali preobčutljivo kožo.
- Ni primerno za: nosečnice; otroke; ljudi, ki trpijo zaradi epilepsije, tumorjev, vnetij; osebe, ki uporabljajo srčni spodbujevalnik; ljudi, občutljive na vročino, vibracije; osebe z ekcemom ali dermatološkimi boleznimi. Za pomoč se obrnite na svojega zdravnika.

OPIS IZDELKA

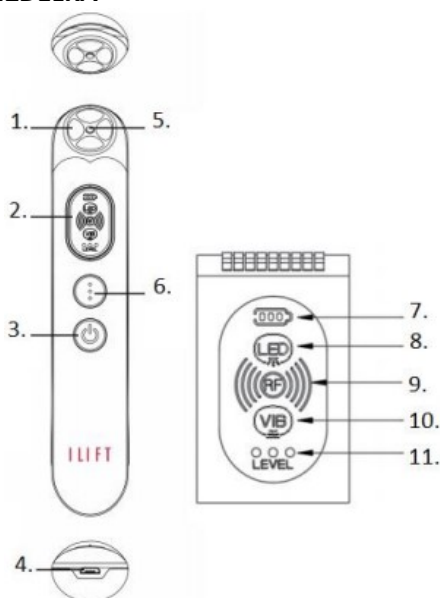

1. Kovinska masažna glava
2. LCD zaslon
3. Gumb za vklop / način
4. Vrata za polnjenje USB
5. Rdeča luč
6. Nastavitev intenzivnosti
7. Stanje baterije
8. LED indikatorska lučka
9. Radiofrekvenčni indikator (RF)
10. Indikator vibracij
11. Prikaz intenzivnosti

UPORABA


Za zagon držite gumb za vklop. Pritisnite za preklop načina.

1. Radijska frekvenca + rdeča luč + vibracije
2. Radijska frekvenca + rdeča luč
3. Radijska frekvenca + vibracije
4. Radijska frekvenca


Nastavitev intenzivnosti je samo za radijsko frekvenco.



Na obraz nanesite ustrezno količino kreme za oči.

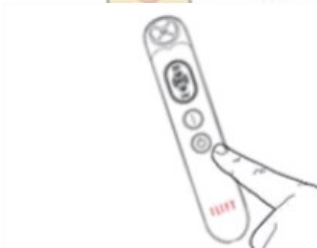

Držite stikalo za vklop, nato pritisnite gumb za vklop, da nastavite način. Pritisnite gumb za nastavitev intenzivnosti, da prilagodite intenzivnost.

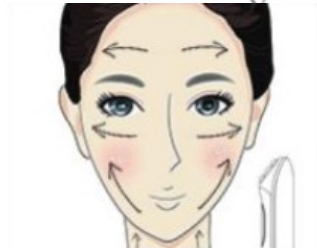

Nežno masirajte predel okoli oči, kot je prikazano.



Po uporabi masažno glavo očistite s suho brisačo, krpo ali prtičkom.

VZDRŽEVANJE

- Kremo enakomerno in v primerni količini nanesite na obraz, da se ne usede čezmerno na glavo.
- Po uporabi očistite glavo s suho brisačo ali prtičkom.
- Zaščitite telo naprave pred stikom z vodo.
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.
- Hraniti v senčnem in suhem prostoru.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana.
- Zaščitite napravo pred udarci in padci.

POLNLENJE

- Če je baterija skoraj prazna, izklopite napravo in jo napolnite.
- Indikator baterije bo med polnjenjem utripal. Simbol preneha utripati, ko je baterija popolnoma napolnjena.
- Če nameravate napravo shranjevati dlje časa, redno polnite baterijo.
- Po polnjenju odklopite polnilnik.

SPECIFIKACIJE

Ime: Radiofrekvenčna masaža oči

Model: IF-1208

Teža: 54g

Dimenzije: 149,9x28x22 mm

Frekvenca vibriranja: 12000 RPM

Čas polnjenja: 3 ure

Delovanje z enim polnjenjem: >30 min

Radijska frekvenca: 400kHz

Vhod: DC5V/1A

Baterija: 500 mAh

VARSTVO OKOLJA

Po izteku življenjske dobe izdelka ali če je morebitno popravilo neekonomično, ga zavržite v skladu z lokalno zakonodajo in okolju prijazno na najbližjem odpadku.

S pravilnim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagate zaščititi zdravje ljudi. Če niste prepričani v pravilno odlaganje, prosite lokalne oblasti, da se izognete kršitvam ali sankcijam.

Baterij ne odlagajte med hišne odpadke, temveč jih oddajte na reciklažo.